

ПОРТАТИВНАЯ ХИРУРГИЯ ДИОДНЫЙ ЛАЗЕР



Wuhan Gigaa Optonics Technology Co.,Ltd.

www.gigaalaser.com

ПОРТАТИВНАЯ ХИРУРГИЯ ДИОДНЫЙ ЛАЗЕР

Новый диодный лазер Gbox от компании GIGAA на сегодняшний день является самым качественным продуктом на рынке. Маленький приборчик мощностью 15 Вт с длиной волны 532нм, 810нм, 940нм, 980нм или 1064нм можно использовать как в режиме постоянного излучения так и в импульсном режиме с контактной и без контактной рукоятками.

Свойства

- Благодаря хорошему дизайну, маленькому размеру и весу, Gbox легко поддается транспортировке
- Большая цветная панель, устройство координирования двойной операции
- Высокая степень интеграции и модульная конструкция
- Новый внутренний дизайн делает сервисное обслуживание простым и более экономным
- Современное программное обеспечение с протоколами преднастройки, настраиваемое вручную оператором.
- С помощью встроенного измерителя мощности излучения пользователь может измерить мощность лазера
- Встроенная система охлаждения воздуха гарантирует стабильную качественную работу и долгий срок эксплуатации



Главные клинические применения

Стоматология
Липолиз (расщепление жира)
EVLA (Эндовазальная лазерная коагуляция вен)
Телеангиэктазия (Лечение капилляров)
Отоларингология
Дерматология
Ортопедия
Дискэктомия (Чрескожная лазерная декомпрессия диска)
Нейрохирургия
Гинекология
Общая хирургия
Терапия
Ветеринария



Вы можете найти больше видео на нашем сайте gigaalaser.com

Аксессуары

Стандартные



Стоматологический наконечник




Волокно



Оптоволоконный стриппер



Защитные очки

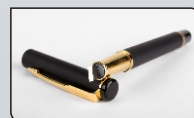

Обрезчик волокна



Ножная педаль


Дополнительные



Наконечник для терапии



Наконечник для отбеливания

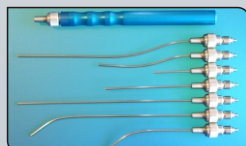

Наконечник для отоларингология



Наконечник для липолиза



Фиксированный наконечник



ADD: B8-A5, Hi-Tech Medical Device Industrial Park, #818 Gaoxin Avenue,
Wuhan 430206, China
Ph: 86-27-67848871 67848872 Fax: 86-27-67848873
<http://www.gigaalaser.com> Email: info@gigaalaser.com



CHEESE™ Velas™



ПОРТАТИВНАЯ ХИРУРГИЯ ДИОДНЫЙ ЛАЗЕР



532 нм зелёный лазер

Хирургия
Терапия
Ветеринария
Косметология (3В/5В/8В -
532 нм зелёный лазер)

Технические характеристики

GBOX

Тип	GBOX-10B/C/F	GBOX-15A/B	GBO	GBOX- 15AP/BP	GBOX-3-8G/GC
Длина волны	980/940/1064	810/980	810+980	810/980+635	532 нм/532 нм+940 нм
Мощность, max	10 Вт	15 Вт	15 Вт +15 Вт	15 Вт+300 мВт	3Вт-8Вт/5Вт+10Вт
Режим работы	непрерывная волна/ импульсный режим				
Время импульса	25 мс -10 с				
Частота повторения	0.05Гц-20кГц				
Направляющий луч	красный диодный лазер 635 нм, мощность <5 мВт				
Режим управления	Сенсорный экран 8 дюймов True Color				
Габаритные размеры	215*245*315 мм				
Срок службы диода	Более 10000 часов				
Гарантия	12 месяцев/ 5 лет технической поддержки				
Вес	4 кг				
Упаковка	картонная упаковка				